


HOTTE À FILTRATION MOLÉCULAIRE

PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

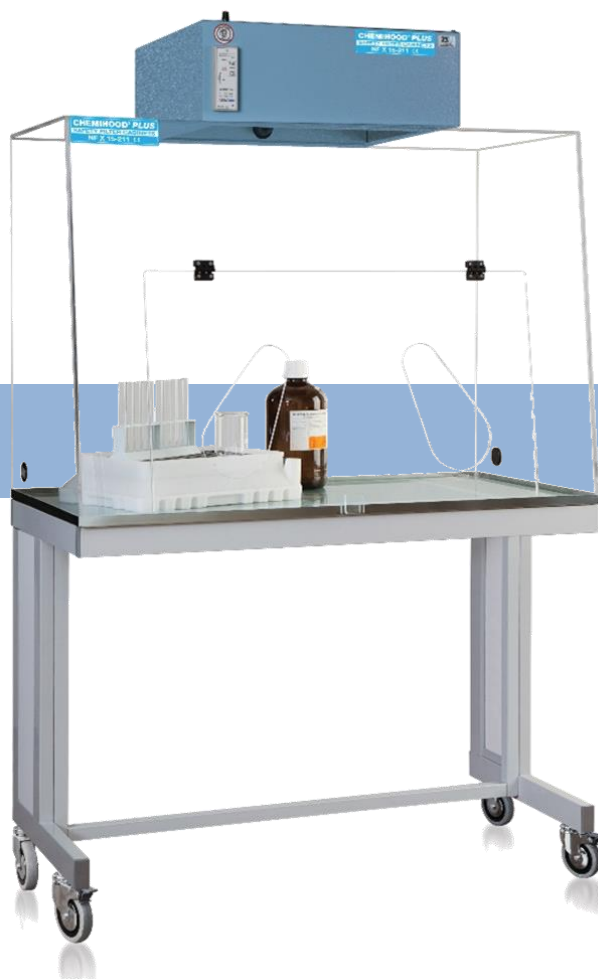

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier électro-galvanisé 10/10^e recouvert d'une peinture époxy
- Coloris gris RAL 7035
- Caisson de filtration bleu RAL 5024
- Parois en méthacrylate de méthyle « optique » d'épaisseur 8mm, vision interne optimale, lumineuse et sans aucune déformation
- Façade avant inclinée (7°) – position ergonomique au poste de travail
- Panneau avant pouvant se relever totalement et être bloqué, de façon à faciliter l'accès à une instrumentation volumineuse, aux produits chimiques ou bien aux opérations de nettoyage
- Capacité de rétention CCl₄ sur le filtre de 7000g (en conformité avec le niveau d'efficacité défini par la norme NF X 15-211), soit un rejet maximal de 50% de la valeur moyenne d'exposition du produit
- Dimensions extérieures : L 1135 x P 600 x H 1000 mm
- Dimensions intérieures : L 1119 x P 584 x H 800 mm
- Poids : 50 KG
- Débit : 100-250 m³/h
- Tension/fréquence : 220V / 50Hz
- Protection IP44
- Niveau sonore : 45 dB

ÉQUIPEMENTS INTERNES

- Bac de rétention en acier inoxydable pour récupérer les liquides en cas de renversements accidentels
- Possibilité de rajouter un plan de travail en verre émaillé ou en HPL d'épaisseur 6mm
- Caisson de ventilation filtrant conforme à la norme NF X 15-211
- Ventilateur axial (turbine)
- Deux passages de main pour le passage de bras permettant des manipulations aisées avec un maximum de sécurité
- Deux passe-câbles situés sur les côtés, permettant d'introduire des câbles électriques et des fluides à l'intérieur de l'enceinte
- Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux de bon fonctionnement – LED visuelle
- Compteur horaire de fonctionnement
- Indicateur de saturation de filtre avec indicateurs visuels par LED

FILTRES

Les hottes sont fournies sans filtre, il doit être choisi en fonction des produits qui seront manipulés sous l'enceinte.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
EOAS	Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus)
EOBE	Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus)
EOMP	Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtre inclus)
EOFO	Filtre à charbon actif pour aldéhydes (pré-filtre inclus)
EOPF	Pré-filtre de rechange

ACCESSOIRES OPTIONNELS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CSF-120E	Plan de travail en verre trempé épaisseur 6mm
CSF-120H	Plan de travail en laminé HPL épaisseur 6mm
CHSCASP120	Piètement sur roulettes
CHSCASPE120	Piètement sur roulettes avec étagère
PE100	Prise électrique murale pour panneau d'habillage sous piètement
HOOD/LUM	Éclairage extérieur
CSPO	Pompe manuelle d'aspiration pour contrôle colorimétrique
CSPO/AA	Lot de 10 tubes colorimétriques pour test corrosif
CSPO/AC	Lot de 10 tubes colorimétriques pour test organique