

EN
14470-1EN
1363-1EN
16121FM
605090
HOMOLOGUÉE
EN14470-1105
TESTÉE SELON
EN14470-1

RSE

FABRICATION
FRANÇAISE

ARMOIRES MULTIRISQUES - EN 14470-1 - 105 MINUTES



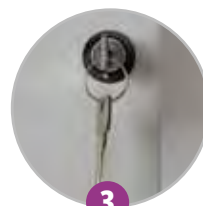
▲ 795+M13



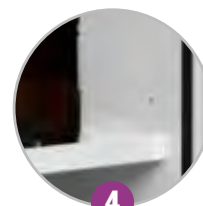
1

Pictogramme
normalisé

2

Ferme-porte avec
thermofusible

3

Fermeture
à clef

4

Étagères
de rétention

5

Déplacement par
transpalette (à vide)

6

Bac de rétention
amovible

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Testées et homologuées à la norme FM6050.
- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1 (ouverture/fermeture de 80000 cycles et mise en place de la charge définie par le constructeur sur les étagères).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1.

AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant.
- Séparation par familles de produits dangereux conformément au Code de la Santé Publique et aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
 - Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
 - Parois intérieures mélaminé blanc RAL 9010.

- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention.
- Point de fixation pour mise à la terre.

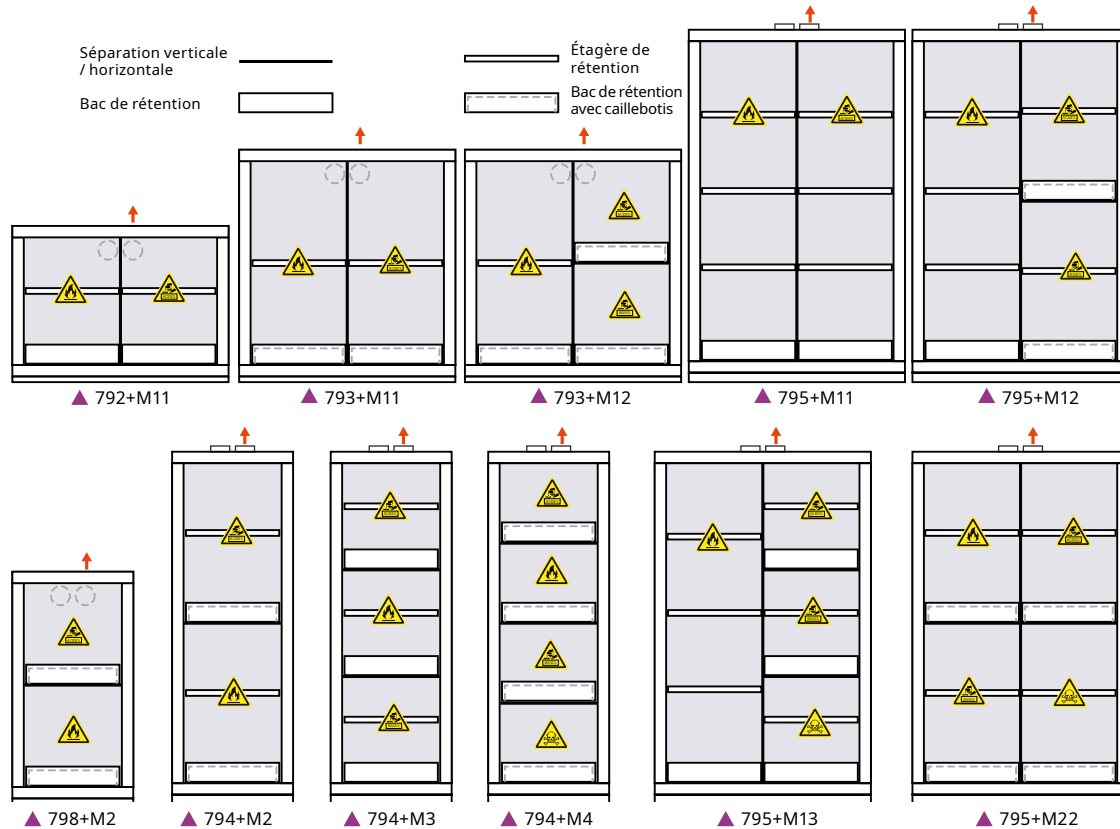
SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermostatée à 47°C.

OPTIONS

- Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794+M et 795+M : Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023.
- Serrure à code (1 par porte).

Hottes et armoires à
filtration - VentilationArmoires
lithium-ionArmoires
inflammablesArmoires
corrosifsArmoires toxiques
et multirisquesRétention
et RéceptifsArmoires à documents
Équipements anti-feuDouches et
premiers secours



Hottes et armoires à filtration - Ventilation
Armoires lithium-ion
Armoires inflammables
Armoires corrosifs

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Réf.	Désignation	Type / capacité de stockage par compartiment (L)(1)				Dim. extérieurs H x L x P (mm)	Fournie avec			Poids (kg)
							Étagères rétention en acier	Bac rétention en acier	Caillebotis pour bac en acier	
792+M11	Armoire sous-pailasse à 2 portes à 2 compartiments	28	28	-	-	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	2	2	option	194
793+M11	Armoire comptoir à 2 porte à 2 compartiments	55	55	-	-	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	2	2	2	311
793+M12	Armoire comptoir à 2 portes à 3 compartiments	55	28	28	-	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	1	3	3	317
798+M2	Armoire comptoir à 1 portes à 2 compartiments	28	28	-	-	1100 x 635 x 670 ⁽²⁾	-	2	2	221
794+M2	Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments	55	55	-	-	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	2	2	2	304
794+M3	Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments	30	30	30	-	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	3	3	option	307
794+M4	Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments	22	22	22	22	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	-	4	4	320
795+M11	Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments	120	120	-	-	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	6	2	option	477
795+M12	Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments	120	55	55	-	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	5	3	2	486
795+M13	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	120	28	28	28	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	6	4	option	489
795+M22	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	55	55	55	55	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	4	4	4	497

ACCESSOIRES

Réf.	Description	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E1	Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 792+M11	30 x 485 x 285	3
B1	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 792+M11	100 x 480 x 315	3
C1	Caillebotis pour armoire 1 porte type 792+M11	90 x 470 x 305	3
E48	Étagère de rétention pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	30 x 490 x 410	3
B48	Bac de rétention pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	100 x 480 x 410	4
C48	Caillebotis pour bac de rétention pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	90 x 460 x 395	3
T48	Tiroir/bac de rétention coulissant pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	80 x 420 x 380	6
SE48	Surétagère en PVC pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	30 x 486 x 376	2
SB148	Bac de rétention en PVC pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	100 x 480 x 409	3

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm
 (2) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm
 (3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

Reportez-vous au tableau d'incompatibilités chimiques et aux précautions d'emploi, afin de valider la configuration de votre armoire selon vos besoins.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 01/2024

Armoires toxiques et multirisques
Rétention et Réceptifs
Armoires à documents
Équipements anti-feu
Douches et premiers secours